

Laboratory Ovens


实验室烘箱

常用实验室烘箱，温度范围40 - 250° C。

设计：烘箱外部由涂漆钢板构成，内部炉膛为铝涂层(CLAD)低碳钢。装有固定层架和活动镀铬隔板。顶部通风口安装一个夹子，以固定水银温度计。75升以上的垂直型烘箱的控制器安装在门下面，水平型烘箱的控制器安装在侧面。

加热：通过安装在炉膛底部的覆盖的因科合金 (incoloy) 电热元件加热和安装在仪器背部或侧面的通风扇以达到自然对流。

控制：控制系统包括一个可直接读数的温度调节装置和过热保护装置，两者都带有校准刻度和损坏保护锁。它们还包括带指示器的主要开关和加热及过热指示器。可选择带液晶数显温度的微处理器或一个独立显示在恒温器上控制温度的液晶温度显示器。所有代数控的仪器，都必须有吹风循环。

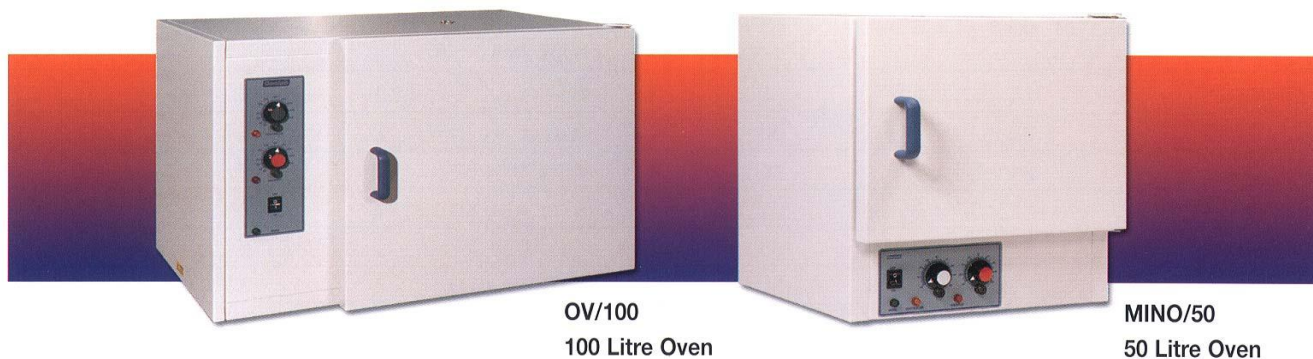

立式							
目录号	容量 (升)	内在尺寸 (高x宽x深) (cm)	外部尺寸 (高x宽x深)	隔板数	隔板数量	隔板位置数量	净重 (kg)
MINO/6	6	15 x 23 x 18	39 x 32 x 32	N/A	1	1	7
MINO/18	18	26 x 26 x 27	50 x 36 x 40	N/A	2	2	14
MINO/30	30	24 x 36 x 35	49 x 45 x 47	49 x 45 x 59	2	2	20
MINO/40	40	32 x 36 x 35	57 x 45 x 47	57 x 45 x 59	2	3	23
MINO/50	50	33 x 49 x 33	58 x 61 x 45	58 x 61 x 57	2	3	26
MINO/75	75	33 x 49 x 46	58 x 61 x 58	58 x 61 x 70	2	3	34
MINO/100	100	45 x 49 x 46	70 x 61 x 58	70 x 61 x 70	3	4	44
MINO/125	125	55 x 49 x 46	80 x 61 x 58	80 x 61 x 70	3	5	52
MINO/150	150	55 x 49 x 54	80 x 61 x 66	80 x 61 x 78	3	5	60
MINO/175	175	67 x 49 x 54	92 x 61 x 66	92 x 61 x 78	4	6	68
MINO/200	200	75 x 49 x 54	100 x 61 x 66	100 x 61 x 78	4	7	76
水平式							
目录号	容量 (升)	内在尺寸 (高x宽x深) (cm)	内部尺寸 (高x宽x深)	外部尺寸 (高x宽x深)	隔板数量	隔板位置	净重 (kg)
OV/75	75	42 x 53 x 35	45 x 49 x 35	55 x 85 x 46	2	3	39
OV/100	100	42 x 53 x 46	45 x 49 x 46	55 x 85 x 57	3	4	48
OV/125	125	52 x 53 x 46	55 x 49 x 46	65 x 85 x 57	3	5	57
OV/150	150	52 x 53 x 54	55 x 49 x 54	65 x 85 x 65	3	5	66
OV/175	175	64 x 53 x 54	67 x 49 x 54	77 x 85 x 65	4	6	75
OV/200	200	72 x 53 x 54	75 x 49 x 54	85 x 85x 65	4	7	85



关注微信公号手机网站: [gzanzun](http://gzanzun.com)

广州市越秀区安尊陶瓷贸易商行

电话: +86-20-83292261

传真: +86-20-83292261

www.gzanzun.com

Email: gzanzun@163.com

广州市越秀区白云路 111 号白云大厦 1013A 室 (510100)